Корзина
ВТ8 (ВТ10)-К-ПЖ50

Паспорт ТКЛШ 2.998.033-06 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина ВТ8 (ВТ10)-К-ПЖ50 предназначена для размещения в жидкостном термостате ВТ8 (ВТ10):

- трех пикнометров ПЖ2-50 ГОСТ 22524 или ПЖ3-1-50 ГОСТ 22524;
- трех мерных колб вместимостью 50 мл ГОСТ 1770;
- прочих плоскодонных емкостей диаметром до 50 мм.

Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение емкостей в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — в соответствии с УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — в соответствии с условиями хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм, не более ..... 220×125×205

2.2 Диаметр рабочего места, мм 50

2.3 Количество рабочих мест 3

2.4 Регулируемая глубина, мм ..... от 45 до 135[1]

2.5 Масса, кг, не более 1.1

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины ВТ8 (ВТ10)-К-ПЖ50 показан на рисунке 1.

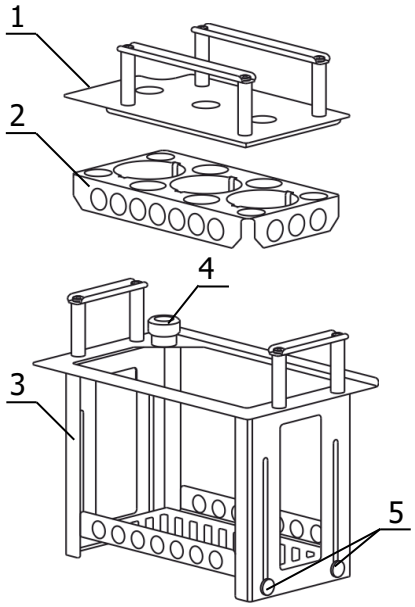


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3.2 Для устойчивого размещения пикнометров в комплект поставки корзины 3 включены крышка 1 с отверстиями диаметром 16 мм и извлекаемое дно 2.

3.3 Корзина оснащена адаптером для контрольного термометра 4.

3.4 Для регулирования глубины погружения пикнометров поднять дно корзины на необходимую высоту и зафиксировать с обеих сторон винтами 5.

[1] Глубина от верхнего края корзины.

3.5 Комплект поставки корзины ВТ8 (ВТ10)-К-ПЖ50 соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 6.172.080-06	1
2 Дно	ТКЛШ 8.613.124-07	1
3 Корзина	ТКЛШ 6.871.026-07	1

4 Сведения о приемке

4.1 Корзина ВТ8 (ВТ10)-К-ПЖ50 соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной к применению.

Дата выпуска _____

м.п.

ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется устранять выявленные неисправности, составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»
634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1
8 (800) 250-26-65
termex@termexlab.ru
https://termexlab.ru/