Корзина ВТ-ро-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.006 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина ВТ-ро-К предназначена для размещения шести цилиндров для ареометров в термостатах модели ВТ-ро или КРИО-ВТ-ро и используется при определении плотности нефтепродуктов, смол, пластификаторов и других жидких химических продуктов в соответствии с ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, ГОСТ 18329 и ГОСТ 18995.1.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм, не более ..... 255×135×430

2.2 Размеры рабочего места, мм:

- диаметр Ø54
- высота 500

2.3 Количество рабочих мест 6

2.4 Масса, кг, не более 1.3

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины показан на рисунке 1.

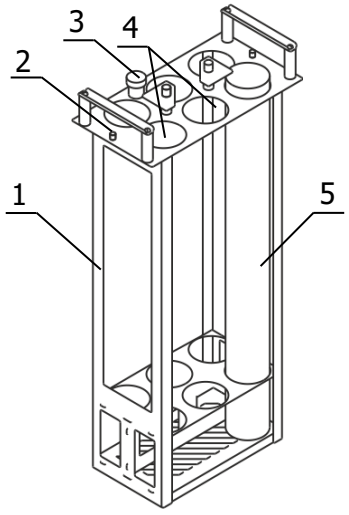


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3.2 Корзина 1 устанавливается в ванне термостата и фиксируется винтами 2 из комплекта поставки термостата.

3.3 Корзина оснащена адаптером для контрольного термометра 3 и устройствами 4, предотвращающими всплытие цилиндров для ареометров 5.

4 Сведения о приемке

Корзина ВТ-ро-К соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.871.000-01 и признана годной для применения.

Дата выпуска _____

м.п.

ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»
634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.
(3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.
termex@termexlab.ru
https://termexlab.ru/